


Zodiac Amino 液相色谱柱分离邻苯二甲酸酯的应用


Columns : Zodiac Amino  
Dimensions : 250x4.6mm,5 $\mu$ m  
Mobile phase : N-Hexane/IPA ; 98.5/1.5  
Flow Rate : 1.3ml/min  
Detection : UV @ 254nm  
Temperature : Ambient

Samples :1. Dibutylphthalate  
2.Diethylphthalate

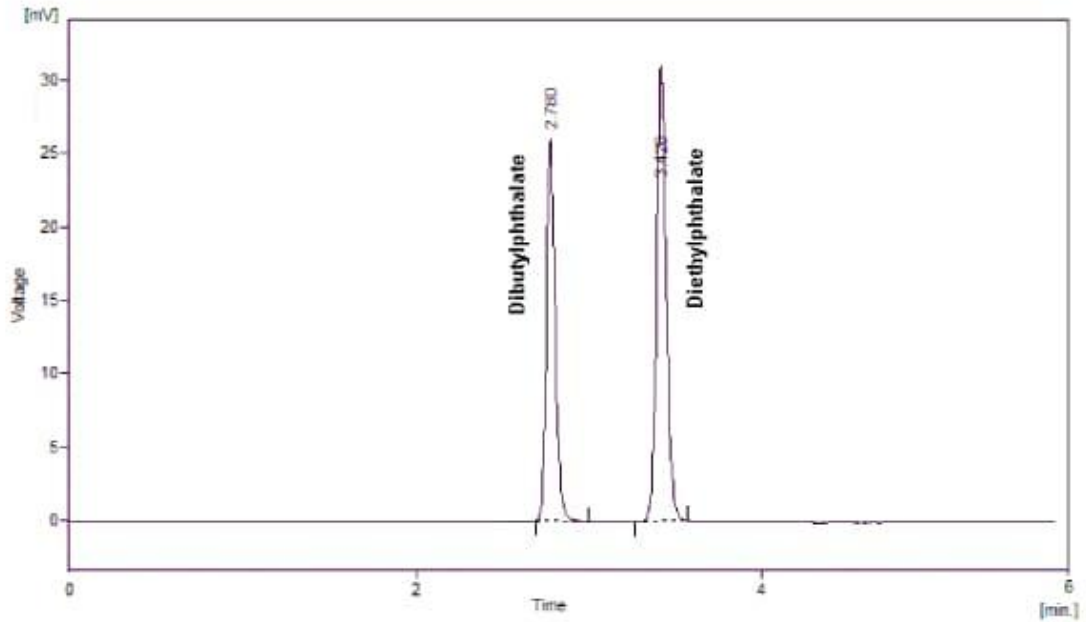

化合物名称：邻苯二甲酸二丁酯

Columns : Zodiac Silica  
Dimensions : 150x4.6mm,5 $\mu$ m  
Mobile Phase : N-Hexane/IPA ; 98.5/1.5  
Flow Rate : 1.3ml/min  
Detection : UV @ 254nm  
Temperature : Ambient

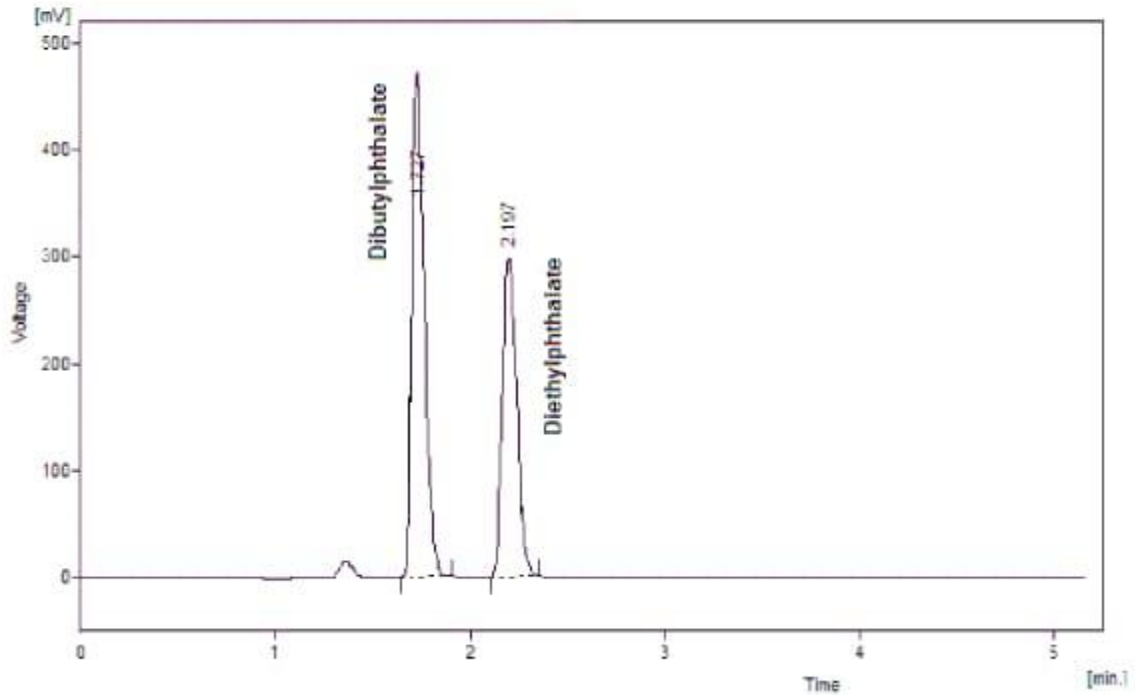

化合物名称：邻苯二甲酸二丁酯

Zodiac Silica 液相色谱柱分离邻苯二甲酸酯的应用